


PRODOTTO

CANNULA YANKAUER CON SELETTORE SCORREVOLE ON-OFF

Materia prima:	manico realizzato in ABS Punta e corpo della cannula in K-RESIN Senza Lattice e senza DEHP
Superficie:	la superficie interna liscia assicura un flusso costante. La cannula è dotata di impugnatura ergonomica.
Controllo del vuoto:	La cannula è dotata di interruttore on – off per il controllo del vuoto. Questo consente di: <ol style="list-style-type: none"> 1. Avere una riserva di vuoto nei vasi alla taratura prescelta; 2. Poter disporre istantaneamente di questa riserva; 3. Ridurre i tempi di aspirazione.
Punta:	Arrotondata e atraumatica per i tessuti (del tipo “a bulbo”).
Dimensioni punta:	I.D. 5 mm – O.D. 8,9 mm (CH 24)
Fori:	Dotata di un foro centrale sulla punta.
Lunghezza cannula:	297 mm
Angolatura:	140°
Attacco per il tubo:	4,5 mm
Tubo di raccordo:	E' possibile avere un kit di aspirazione che include una cannula Yankauer e un tubo di raccordo disponibile in diverse lunghezze e diversi diametri.
Confezionamento:	in doppia busta, tipo “PEEL”
Sterilizzazione:	Effettuata con miscela di ETO + CO2
Marchio commerciale:	Securflow Vià!
CND:	A06010103
Numero di repertorio:	1631590/R
Immagine del dispositivo:	

1. Punta e Corpo
2. Valvola di controllo
3. Manico

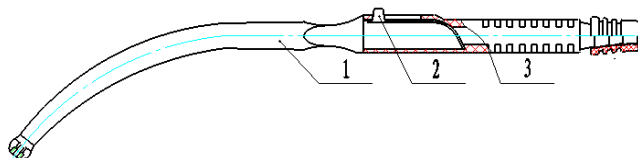

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
126140105S41	Cannula di aspirazione Yankauer, punta a bulbo, con interruttore On - Off, sterile.	20 pz/astuccio 200 pz/cartone
126140105S01	Cannula di aspirazione Yankauer, punta dritta, con interruttore On - Off, sterile.	20 pz/astuccio 200 pz/cartone