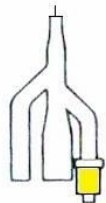



**PRODOTTO**

**CATETERE A PALLONCINO IN SILICONE PURO CON LINEA  
RADIOPACA E PUNTA DUFOUR**

<b>Materia prima:</b>	Realizzato in silicone puro
<b>Punta:</b>	Curva, tipo Dufour, chiusa e ben arrotondata, atraumatica per fornire migliore protezione al tessuto sensibile ed evitare possibili lacerazioni.
<b>Occhielli:</b>	Grandi e lisci, posti uno di fronte all'altro, minimizzano le occlusioni e consentono il massimo drenaggio.
<b>Vie:</b>	2 o 3
<b>Lunghezza:</b>	410 mm
<b>Dimensioni:</b>	CH 16, 18, 20, 22, 24
<b>Palloncino:</b>	30 ml Il nostro processo di fabbricazione garantisce al palloncino una forza eccezionale, simmetria ed elasticità tali da assicurare un corretto gonfiamento e sgonfiamento.
<b>Asta del catetere:</b>	Il silicone trasparente di qualità superiore consente di visualizzare il flusso di drenaggio e nel contempo di minimizzare le incrostazioni e i traumi uretrali. E' provvista di linea radiopaca realizzata su tutta la lunghezza per verificare l'esatta posizione del tubo.
<b>Congiunzione a Y:</b>	Spessa e rinforzata, impedisce contrazioni e torsioni.
<b>Imbuto:</b>	Trasparente, consente l'esame visivo dello scarico offrendo un collegamento sicuro alla sacca di drenaggio.
<b>Valvola di gonfiaggio:</b>	Realizzata in plastica dura di alta qualità, viene fissata tramite un anello di bloccaggio che assicura un affidabile gonfiaggio e sgonfiaggio del palloncino ed impedisce eventuali perdite.
<b>Imballo:</b>	Ogni catetere è sigillato individualmente in un fodero interno e chiuso in un sacchetto con peel per facilitare un trasferimento asettico ed offre il più alto livello di sterilità.
<b>Sterilizzazione:</b>	effettuata con miscela ETO + CO <sub>2</sub>
<b>Marchio registrato:</b>	Securdrain Vià!
<b>CND:</b>	U010204
<b>Numero di repertorio:</b>	1356731/R

**DISEGNO TECNICO**

<p><b>3 VIE</b></p> 	<p><b>DUFOUR</b></p> 	Misure	Palloncino (ml)	Lunghezza (cm)
		16 - 18-20-22-24-26	30	41



**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO FOLEY ADULTO, 2 VIE**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
11501363161	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 16	10 pz/astuccio 100 pz/ cartone
11501363181	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 18	10 pz/astuccio 100 pz/ cartone
11501363201	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 20	10 pz/astuccio 100 pz/ cartone
11501363221	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 22	10 pz/astuccio 100 pz/ cartone
11501363241	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 24	10 pz/astuccio 100 pz/ cartone