


PRODOTTO

CATETERE A PALLONCINO IN SILICONE PURO CON LINEA RADIOPACA

Materia prima:	Realizzato in silicone puro
Punte:	Chiuse, ben arrotondate, atraumatiche per fornire migliore protezione al tessuto sensibile ed evitare possibili lacerazioni.
Occhielli:	Grandi e lisci, posti uno di fronte all'altro, minimizzano le occlusioni e consentono il massimo drenaggio.
Vie:	2 o 3
Lunghezza:	Pediatrico: 320 mm Adulto: 410 mm
Dimensioni:	Pediatrico: CH 6, 8, 10 – le misure pediatriche sono dotate di mandrino Adulto: CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Palloncino:	2 e 3 ml per le sonde pediatriche, 5/10 o 30 ml per le altre misure. Il nostro processo di fabbricazione garantisce al palloncino una forza eccezionale, simmetria ed elasticità tali da assicurare un corretto gonfiamento e sgonfiamento.
Asta del catetere:	Il silicone trasparente di qualità superiore consente di visualizzare il flusso di drenaggio e nel contempo di minimizzare le incrostazioni e i traumi uretrali. E' provvista di linea radiopaca realizzata su tutta la lunghezza per verificare l'esatta posizione del tubo. La misura CH 6 ha solamente la punta radiopaca.
Congiunzione a Y:	Spessa e rinforzata, impedisce contrazioni e torsioni.
Imbuto:	Trasparente, consente l'esame visivo dello scarico offrendo un collegamento sicuro alla sacca di drenaggio.
Valvola di gonfiaggio:	Realizzata in plastica dura di alta qualità, viene fissata tramite un anello di bloccaggio che assicura un affidabile gonfiaggio e sgonfiaggio del palloncino ed impedisce eventuali perdite.
Imballo:	Ogni catetere è sigillato individualmente in un fodero interno e chiuso in un sacchetto con peel per facilitare un trasferimento asettico ed offre il più alto livello di sterilità.
Sterilizzazione:	effettuata con miscela ETO + CO ₂
Marchio registrato:	Securdrain Vià!
CND:	U0110201
Numero di repertorio:	82280/R
Certificato CE:	G1 16 04 36310 033



DISEGNO TECNICO

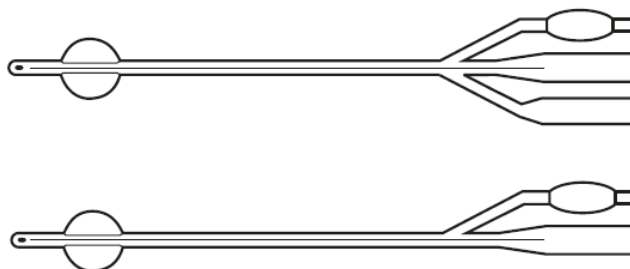

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO FOLEY PEDIATRICO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
11501312061*	Catetere Foley pediatrico, 2 vie, 32 cm, palloncino 2 ml sterile, CH 6	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501312082*	Catetere Foley pediatrico, 2 vie, 32 cm, palloncino 3 ml sterile, CH 8	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501312103*	Catetere Foley pediatrico, 2 vie, 32 cm, palloncino 3 ml sterile, CH 10	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO FOLEY ADULTO, 2 VIE

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
11501322121*	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -10 ml sterile, CH 12	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501322141*	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -10 ml sterile, CH 14	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501322161*	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -10 ml sterile, CH 16	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501322181*	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -10 ml sterile, CH 18	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501322201*	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -10 ml sterile, CH 20	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501322221*	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -10 ml sterile, CH 22	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501322241*	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5 -10 ml sterile, CH 24	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501322122*	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 12	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501322142*	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 14	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501322162*	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 16	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501322182*	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 18	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501322202*	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 20	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501322222*	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 22	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone

11501322242*	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 24	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501322262*	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, CH 26	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO FOLEY ADULTO, 3 VIE

<i>CODICE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>CONFEZIONAMENTO</i>
11501323161*	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 5 -10 ml sterile, CH 16	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501323181*	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 5 -10 ml sterile, CH 18	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501323201*	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 5 -10 ml sterile, CH 20	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501323221*	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 5 -10 ml sterile, CH 22	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501323241*	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 5 -10 ml sterile, CH 24	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone