


PRODOTTO

CATETERE A PALLONCINO IN SILICONE PURO CON LINEA RADIOPACA E SCANALATURE LONGITUDINALI

Materia prima:	Realizzato in silicone puro
Punte:	Ben arrotondate, resistenti alle piegature, assicurano un facile inserimento.
Occhielli:	Grandi e lisci, posti uno di fronte all'altro, minimizzano le occlusioni e consentono il massimo drenaggio.
Vie:	2 / 3
Lunghezza:	Pediatrico: 315 mm Adulto: 410 mm
Dimensioni:	Pediatrico: CH 10 Adulto: CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Palloncino:	3/5 ml per le sonde pediatriche, 5/10 ml o 30 ml per le altre misure. Il nostro processo di fabbricazione garantisce al palloncino una forza eccezionale, simmetria ed elasticità tali da assicurare un corretto gonfiamento e sgonfiamento.
Asta del catetere:	Il silicone trasparente di qualità superiore consente di visualizzare il flusso di drenaggio e nel contempo di minimizzare le incrostazioni e i traumi uretrali. E' provvista di linea radiopaca realizzata su tutta la lunghezza per verificare l'esatta posizione del tubo. E' provvista di scanalature longitudinali che riducono la superficie di contatto tra la parete uretrale ed il catetere, favorendo il deflusso verso l'esterno delle secrezioni uretrali. Tali caratteristiche permettono di evitare il ristagno uretrale di liquidi, potenziali fonti di colture batteriche, e quindi l'eliminazione di infiammazioni uretrali. Le scanalature longitudinali favoriscono inoltre l'introduzione del catetere grazie al minor attrito con la parete uretrale con conseguente riduzione dei traumi uretrali. Facilitano altresì l'assorbimento di eventuali sostanze medicamentose applicate sulla lunghezza del catetere.
Congiunzione a Y:	Spessa e rinforzata, impedisce contrazioni e torsioni.
Imbuto:	Trasparente, consente l'esame visivo dello scarico offrendo un collegamento sicuro alla sacca di drenaggio.
Valvola di gonfiaggio:	Realizzata in plastica dura di alta qualità, viene fissata tramite un anello di bloccaggio che assicura un affidabile gonfiaggio e sgonfiaggio del palloncino ed impedisce eventuali perdite.
Imballo:	Ogni catetere è sigillato individualmente in un fodero interno e chiuso in un blister formato da carta medica e film, dotato di apposita linguetta per facilitare l'apertura. Su richiesta il blister può essere a sua volta inserito in un cartoncino singolo.
Sterilizzazione:	effettuata con miscela ETO + CO ₂
Marchio registrato:	Securdrain Vià!
CND:	U0110201
Numero di repertorio:	82280/R

DISEGNO TECNICO

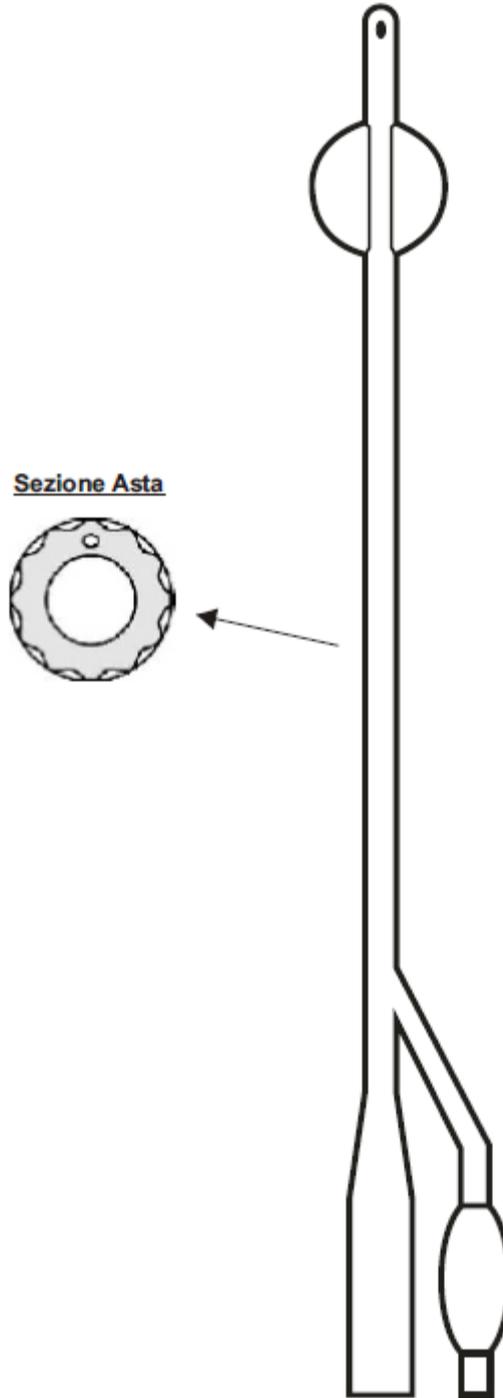

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO FOLEY PEDIATRICO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
11501392101	Catetere Foley pediatrico, 2 vie, 31,5 cm, palloncino 3-5 ml sterile, con scanalature CH 10	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO FOLEY ADULTO, 2 VIE

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
11501392121	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5-10 ml sterile, con scanalature CH 12	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501392141	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5-10 ml sterile, con scanalature CH 14	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501392161	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5-10 ml sterile, con scanalature CH 16	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501392181	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5-10 ml sterile, con scanalature CH 18	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501392201	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5-10 ml sterile, con scanalature CH 20	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501392221	Catetere Foley, 2 vie, 41 cm, palloncino 5-10 ml sterile, con scanalature CH 22	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO FOLEY ADULTO, 3 VIE

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
11501393121	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, con scanalature CH 12	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501393141	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, con scanalature CH 14	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501393161	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, con scanalature CH 16	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501393181	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, con scanalature CH 18	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501393201	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, con scanalature CH 20	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501393221	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, con scanalature CH 22	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone
11501393241	Catetere Foley, 3 vie, 41 cm, palloncino 30 ml sterile, con scanalature CH 24	10 pz/astuccio 200 pz/ cartone