

PRODOTTO


SACCA RACCOLTA URINA CON VALVOLA ANTIREFLUSSO E RUBINETTO DI SCARICO A T

Corpo della sacca:	realizzato in PVC atossico, morbido e resistente. DEHP FREE.
Colore della sacca:	trasparente
Tubo della sacca:	realizzato in PVC DEHP FREE atossico e resistente. L'alta qualità del granulo impiegato conferisce un elevato effetto "memoria" che lo rende resistente alle piegature. La lunghezza del tubo può essere adattata alle esigenze del cliente (tra 90 cm e 150 cm).
Raccordo:	universale, bianco, in PVC atossico.
Valvola antireflusso:	impedisce il reflusso di urina e gas.
Rubinetto di svuotamento:	Lo svuotamento della sacca avviene tramite il rubinetto del tipo "a croce" o a flusso libero, con alloggiamento laterale. Il pratico e maneggevole rubinetto consente un rapido e facile svuotamento del liquido impedendo la formazione di ostruzioni a livello del rubinetto.
Saldatura:	doppia, di ottima tenuta.
Occhielli:	4, rinforzati che consentono un sostegno sicuro tramite il sistema di fissaggio al letto e assicurano la massima sicurezza nell'utilizzo e nella movimentazione della sacca.
Serigrafia:	Asimmetrica per consentire una corretta lettura del liquido contenuto.
Capacità della sacca:	2000 ML
Sterilizzazione:	Su richiesta, effettuata con miscela ETO + CO ₂
Marchio registrato:	Securdrain
Codice CND:	A06030301
Numero di repertorio:	82404/R (per le sacche sterili) – 82505/R (per le sacche sterili)

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
001019087900	Sacca non sterile, 2 lt, tubo 90 cm, con valvola e rubinetto di scarico	200 pz/cartone
001011087900	Sacca sterile, 2 lt, tubo 90 cm, con valvola e rubinetto di scarico	100 pz/cartone
001019087C30	Sacca non sterile, 2 lt, tubo 130 cm, con valvola e rubinetto di scarico	200 pz/cartone
001011087C30	Sacca sterile, 2 lt, tubo 130 cm, con valvola e rubinetto di scarico	100 pz/cartone

DISEGNO TECNICO

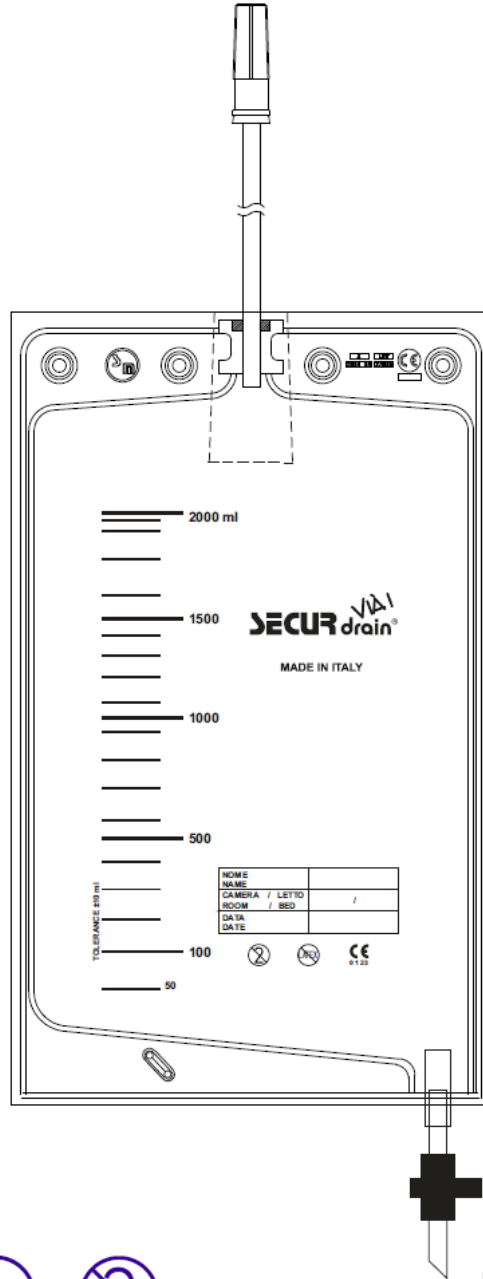

2000 ml
 1500
SECUR drain
 MADE IN ITALY
 1000
 500
 TOLERANCE ±10 ml
 100
 50

NOME	
CAMERA / LETTO	/
ROOM / BED	/
DATA	
DATE	




 0123




 0123