


**PRODOTTO**

**SERBATOIO DI DRENAGGIO OVOIDALE IN SILICONE**

Destinazione d'uso:	drenaggio post operatorio e raccolta dei liquidi drenati
Materia prima:	realizzato interamente in silicone 100% medical grade.
Superficie:	Serbatoio di forma ovoidale, superficie liscia. Dotato di valvola di non ritorno che impedisce il riflusso dei liquidi siero ematici drenati, riducendo il rischio di infezioni retrograde.
Composizione :	dotato di tappo e raccordo per il collegamento al drenaggio che consente un'aspirazione costante
Accessori:	Dotato di sistema di fissaggio al gancio e fermalenzuolo
Capacità :	100 ml 200 ml 400 ml
Sterilizzazione:	Effettuata con miscela ETO + CO <sub>2</sub>
Confezionamento:	blister medicale in doppio involucro sterile
Marchio registrato:	SILDRAIN by Securmed
<b>CND:</b>	A0601010102
<b>Numero di repertorio:</b>	1235805/R

**DISEGNO TECNICO**

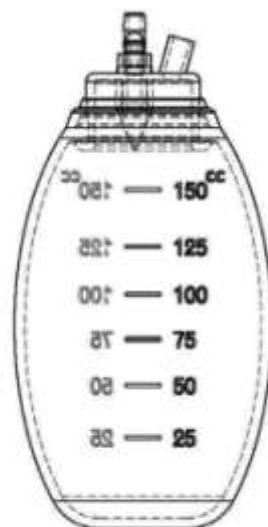

**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	
<b>123030120001</b>	Bulbo in silicone 100 ml, sterile.	Conf. Singola Sterile
<b>123030120003</b>	Bulbo in silicone 200 ml, sterile.	Conf. Singola Sterile
<b>123030120009</b>	Bulbo in silicone 400 ml, sterile.	Conf. Singola Sterile
<b>123030120020</b>	Bulbo in silicone 100 ml, sterile con coda	Conf. Singola Sterile
<b>123030120030</b>	Bulbo in silicone 200 ml, sterile con coda	Conf. Singola Sterile
<b>123030920020</b>	Bulbo in silicone 100 ml con coda –non sterile	Conf. Singola Sterile
<b>123030920030</b>	Bulbo in silicone 200 ml con coda –non sterile	Conf. Singola Sterile