

## **PRODOTTO**

### **SET PRECOLLEGATO - SACCA RACCOLTA URINA "CIRCUITO CHIUSO" SM4L STERILE RACCORDATA A CATETERE FOLEY IN LATTICE SILICONATO**

#### **SACCA SM4L**


<b>Corpo della sacca:</b>	realizzato in PVC atossico, morbido e resistente. Colore bianco opaco e trasparente
<b>Tubo della sacca:</b>	a sezione larga, realizzato in PVC atossico e trasparente; l'alta qualità del granulo di PVC utilizzato conferisce un elevato effetto "memoria" resistente alle piegature. Il diametro esterno misura 9,5 mm. Lunghezza 90 cm
<b>Raccordo:</b>	Universale, bianco, in materiale atossico (ABS); provvisto di punto prelievo.
<b>Punto prelievo:</b>	Assenza di lattice garantita; consente di effettuare prelievi di campioni di urina. A richiesta punto prelievo "senz'ago", che garantisce una funzionalità ottimale per 10 prelievi.
<b>Valvola antireflusso:</b>	stretta, per impedire il reflusso dell'urina e dei gas.
<b>Rubinetto e svuotamento:</b>	modello a "T" del tipo "flusso libero", che garantisce uno svuotamento rapido e facilitato impedendo la formazione di ostruzioni, in fase di espulsione, a livello del rubinetto.
<b>Tempo di utilizzo:</b>	5 giorni. Il rubinetto a T garantisce l'igiene e l'utilizzo fino a 8 -10 giorni (se abbinato alla sacca ausiliaria di svuotamento "Vià").
<b>Saldatura:</b>	doppia, di ottima tenuta.
<b>Occhielli:</b>	4, rinforzati per permettere, attraverso un dispositivo di sostegno adeguato, una sospensione sicura e stabile, l'aggancio al letto e comode manipolazioni della sacca.
<b>Graduazione:</b>	Asimmetrica, per consentire una corretta lettura del liquido.
<b>Capacità della sacca:</b>	2000 ml

#### **CATETERE FOLEY IN LATTICE**

<b>Materia prima:</b>	Realizzato in lattice siliconato
<b>Punte:</b>	Tipo Nelaton, chiuse, ben arrotondate, resistenti alle piegature, assicurano un facile inserimento.
<b>Occhielli:</b>	Grandi e lisci, posti uno di fronte all'altro, minimizzano le occlusioni e consentono il massimo drenaggio.
<b>Vie:</b>	2
<b>Lunghezza:</b>	Adulto: 400 mm
<b>Dimensioni:</b>	Adulto: CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
<b>Palloncino:</b>	5/15 ml. Il nostro processo di fabbricazione garantisce al palloncino una forza eccezionale, simmetria ed elasticità tali da assicurare un corretto gonfiamento e sgonfiamento.
<b>Asta del catetere:</b>	Impedisce torsioni e minimizza le incrostazioni ed i traumi per la presenza di silicone nella mescola
<b>Imbuto:</b>	A valvola speciale per siringhe luer e luer lock, assicura un affidabile utilizzo del palloncino ed impedisce eventuali perdite.
<b>Valvola di gonfiaggio:</b>	Realizzata in plastica dura di alta qualità, viene fissata tramite un anello di bloccaggio che assicura un affidabile gonfiaggio e sgonfiaggio del palloncino ed impedisce eventuali perdite.

<b>Imballo:</b>	Ogni catetere è sigillato individualmente in un fodero interno e chiuso in un sacchetto con peel per facilitare un trasferimento asettico ed offre il più alto livello di sterilità.
<b>Tempo di permanenza:</b>	Il tempo massimo suggerito per la permanenza del dispositivo all'interno del corpo del paziente è di 7 giorni. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
<b>Destinazione d'uso:</b>	drenaggio urinario
<b>Marchio registrato:</b>	Securdrain
<b>Sterilizzazione:</b>	Effettuata con miscela ETO + CO <sub>2</sub>

**DISEGNO TECNICO**

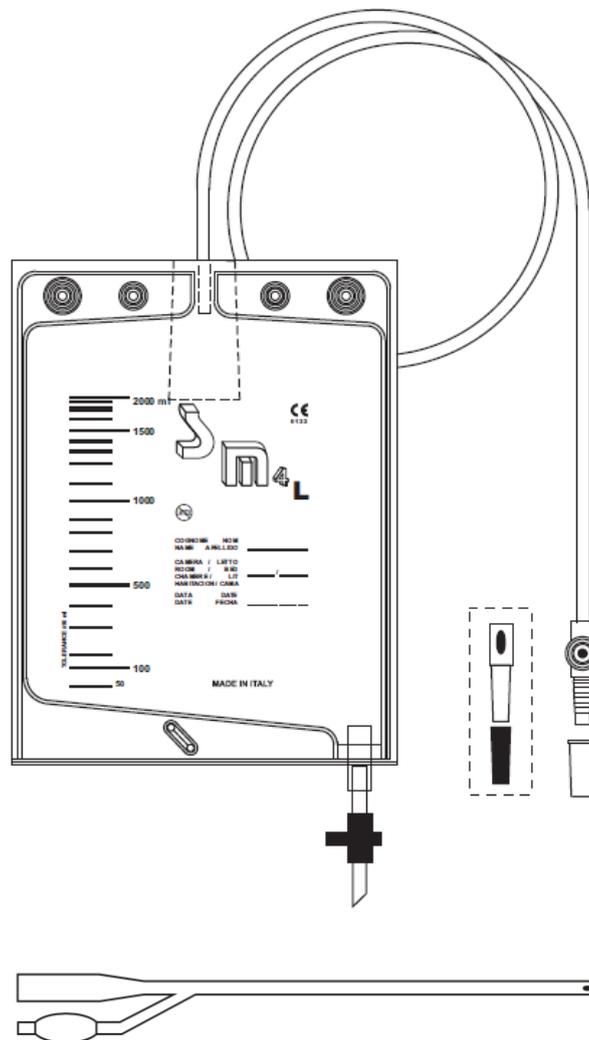

**CODIFICA E CONFEZIONAMENTO**

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>CONFEZIONAMENTO</b>
0100111C22BA	Set precollegato SM4L con catetere foley in lattice siliconato, 2 vie CH 12 , sterile	50 pz/cartone
0100111C22BB	Set precollegato SM4L con catetere foley in lattice siliconato, 2 vie CH 14 , sterile	50 pz/cartone
0100111C22BC	Set precollegato SM4L con catetere foley in lattice siliconato, 2 vie CH 16 , sterile	50 pz/cartone
0100111C22BD	Set precollegato SM4L con catetere foley in lattice siliconato, 2 vie CH 18 , sterile	50 pz/cartone
0100111C22BE	Set precollegato SM4L con catetere foley in lattice siliconato, 2 vie CH 20 , sterile	50 pz/cartone