

PRODOTTO

SET PRECOLLEGATO - SACCA RACCOLTA URINA "CIRCUITO CHIUSO" SM7 STERILE RACCORDATA A CATETERE FOLEY 100% SILICONE

SACCA SM7


Corpo della sacca:	realizzato in PVC atossico, morbido e resistente, colore bianco opaco e trasparente
Tubo della sacca:	a sezione larga, realizzato in PVC atossico e trasparente; l'alta qualità del granulo di PVC utilizzato conferisce un elevato effetto "memoria" resistente alle piegature. Dotato di piastrina stringi tubo. Lunghezza 90 cm
Raccordo:	Universale, bianco, in materiale atossico; provvisto di punto prelievo senz'ago.
Punto prelievo:	Consente di effettuare prelievi di campioni di urina. Garantisce una funzionalità ottimale per 10 prelievi.
Valvola antireflusso:	stretta, per impedire il reflusso dell'urina e dei gas.
Rubinetto e svuotamento:	modello a "T" del tipo "flusso libero", che garantisce uno svuotamento rapido e facilitato impedendo la formazione di ostruzioni, in fase di espulsione, a livello del rubinetto.
Tempo di utilizzo:	5 giorni. Il rubinetto a T garantisce l'igiene e l'utilizzo fino a 8 -10 giorni (se abbinato alla sacca ausiliaria di svuotamento "Vià").
Saldatura:	doppia, di ottima tenuta.
Occhielli:	4, rinforzati per permettere, attraverso un dispositivo di sostegno adeguato, una sospensione sicura e stabile, l'aggancio al letto e comode manipolazioni della sacca.
Graduazione:	Asimmetrica, per consentire una corretta lettura del liquido.
Capacità della sacca:	2000 ml
Accessori:	<u>supporto in plastica</u> assemblato alla sacca per garantire un sostegno ottimale; <u>camera antibatterica</u> ; <u>filtro d'aria</u> per garantire la compensazione della pressione; <u>piastrina stringi tubo</u> per facilitare il prelievo dei campioni d'urina, <u>ferma lenzuolo</u> .

CATETERE FOLEY IN SILICONE

Materia prima:	Realizzato in silicone puro
Punte:	Chiuse, ben arrotondate, atraumatiche per fornire migliore protezione al tessuto sensibile ed evitare possibili lacerazioni.
Occhielli:	Grandi e lisci, uno di fronte all'altro, minimizzano le occlusioni e consentono il massimo drenaggio.
Vie:	2
Lunghezza:	Adulto: 410 mm
Dimensioni:	Adulto: CH 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Palloncino:	5/10. Il nostro processo di fabbricazione garantisce al palloncino una forza eccezionale, simmetria ed elasticità tali da assicurare un corretto gonfiamento e sgonfiamento.

- Asta del catetere:** Il silicone trasparente di qualità superiore consente di visualizzare il flusso di drenaggio e nel contempo di minimizzare le incrostazioni e i traumi uretrali. E' provvista di linea radiopaca realizzata su tutta la lunghezza per verificare l'esatta posizione del tubo.
- Congiunzione a Y:** Spessa e rinforzata, impedisce contrazioni e torsioni.
- Imbuto:** Trasparente, consente l'esame visivo dello scarico offrendo un collegamento sicuro alla sacca di drenaggio.
- Valvola di gonfiaggio:** Realizzata in plastica dura di alta qualità, viene fissata tramite un anello di bloccaggio che assicura un affidabile gonfiaggio e sgonfiaggio del palloncino ed impedisce eventuali perdite.
- Imballo:** Ogni catetere è sigillato individualmente in un fodero interno e chiuso in un sacchetto con peel per facilitare un trasferimento asettico ed offre il più alto livello di sterilità.
- Sterilizzazione:** Effettuata con miscela ETO + CO₂
- CND:** A06030301
- Numero di repertorio:** 82404/R

DISEGNO TECNICO

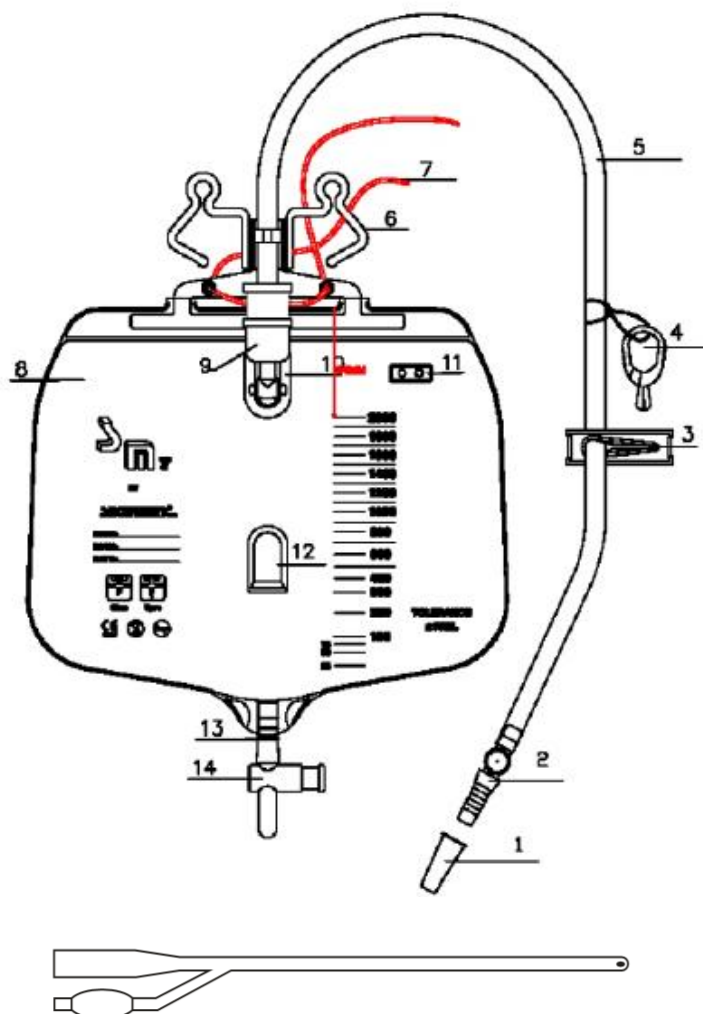

CODIFICA E CONFEZIONAMENTO

CODICE	DESCRIZIONE	CONFEZIONAMENTO
0100112E21CA	Set precollegato SM7 con catetere foley 100% silicone, 2 vie CH 12 , sterile	40 pz/cartone
0100112E21CB	Set precollegato SM7 con catetere foley 100% silicone, 2 vie CH 14 , sterile	40 pz/cartone
0100112E21CC	Set precollegato SM7 con catetere foley 100% silicone, 2 vie CH 16 , sterile	40 pz/cartone
0100112E21CD	Set precollegato SM7 con catetere foley 100% silicone, 2 vie CH 18 , sterile	40 pz/cartone
0100112E21CE	Set precollegato SM7 con catetere foley 100% silicone, 2 vie CH 20 , sterile	40 pz/cartone